


Angiographic

肺動脈造影用カテーテル

押し出し成形X線不透過性ポリマーチューブ製、2ルーメン。拡張用ルーメンは、テーパー付きチップに取り付けたラテックスバルーンに接続しています。注入用ルーメンは注入用側孔に接続。側孔はバルーンのすぐ近位に、対側に2列あります。

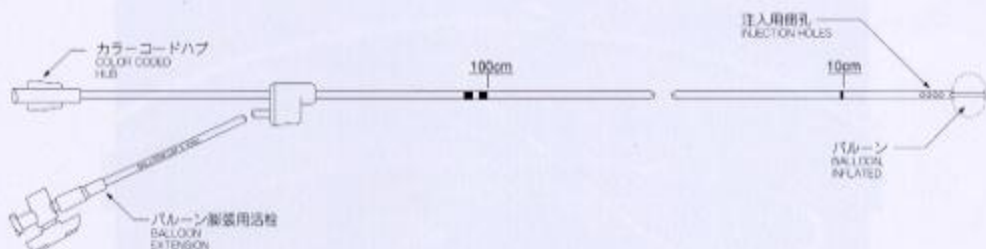

承認番号：08B輸第0495号

モデル番号	サイズ	使用イントロ デューサー サイズ	有効長さ	材質	最大バルーン 拡張容量	最大注入 レート	最大注入圧
242-50 (7304/V)	4FR	4FR	50cm	塩化ビニール	0.5cc	8cc/sec	350PSI
242-50P (7304)	4FR	4FR	50cm	ポリウレタン	0.5cc	8cc/sec	350PSI
252-80 (7335/V)	5FR	5FR	80cm	塩化ビニール	0.75cc	11cc/sec	400PSI
252-80P (7335)	5FR	5FR	80cm	ポリウレタン	0.75cc	14cc/sec	500PSI
262-90 (7366/V)	6FR	6FR	90cm	塩化ビニール	1.25cc	17cc/sec	400PSI
262-90P (7366)	6FR	6FR	90cm	ポリウレタン	1.25cc	23cc/sec	500PSI
272-110 (7377/V)	7FR	7FR	110cm	塩化ビニール	1.5cc	28cc/sec	500PSI
272-110P (7377)	7FR	7FR	110cm	ポリウレタン	1.5cc	30cc/sec	500PSI

適用

造影用右心カテーテル術、肺動脈造影、右心および肺動脈圧測定。造影剤注入可。右心を経由する全ての房室・血管の圧測定も可能。