


Double Wedge Pressure

ダブルウェッジ圧モニターカテーテル

押し出し成形X線不透過性ポリマーチューブ製、3ルーメン。太いルーメンはカテーテルチップ部の末端まであります。細いルーメンでラテックスバルーンを拡張・収縮します。3番目のルーメンはカテーテルチップから19cmまたは9cmの近位末端にあります。2つのルーメンにより、様々な検査条件下での右房圧モニターが行えます。

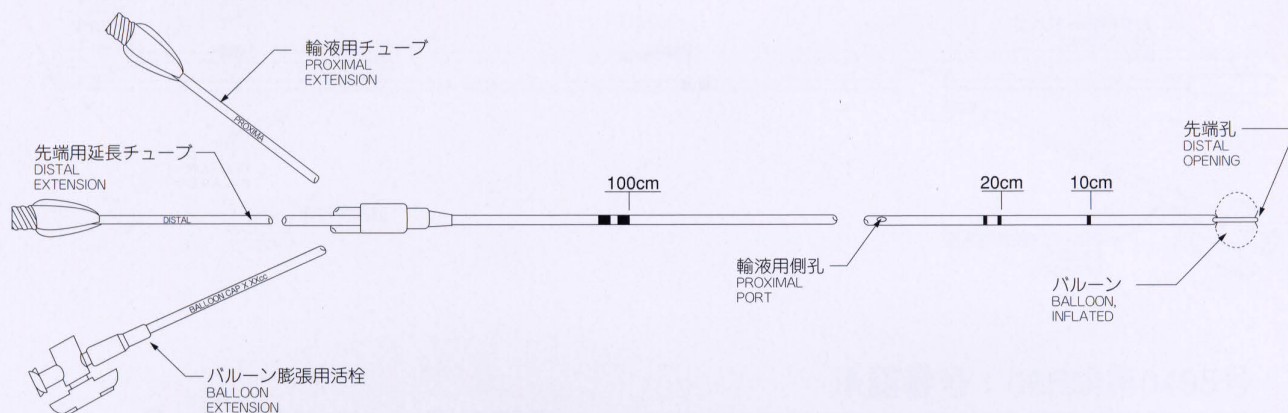

承認番号：08B輸第0495号

モデル番号	サイズ	使用イントロ デューサー サイズ	有効長さ	材質	最大バルーン 膨張容量	膨張時 バルーン径	ガイドワイヤー サイズ	プロキシマル ポート位置
353-80	5FR	5FR	80cm	塩化ビニール	0.75cc	8mm	.018in.	9cm
353-80P	5FR	5FR	80cm	ポリウレタン	0.75cc	8mm	.018in.	9cm
363-80	6FR	6FR	80cm	塩化ビニール	1.25cc	10mm	.021in.	9cm
363-80P	6FR	6FR	80cm	ポリウレタン	1.25cc	10mm	.021in.	9cm
373-110	7FR	7FR	110cm	塩化ビニール	1.5cc	12mm	.025in.	19cm
373-110P	7FR	7FR	110cm	ポリウレタン	1.5cc	12mm	.025in.	19cm

適用

右房圧モニターおよびウェッジ圧カテーテルと同時パラメータのモニター可能。