


Wedge Pressure

ウェッジ圧モニターカテーテル

押し出し成形X線不透過性ポリマーチューブ製、2ルーメン。バルーン拡張用ルーメンの先端孔はカテーテル先端テーパー部にあります。注入/圧ルーメンの長さはカテーテル先端のバルーンディスタル部までです。

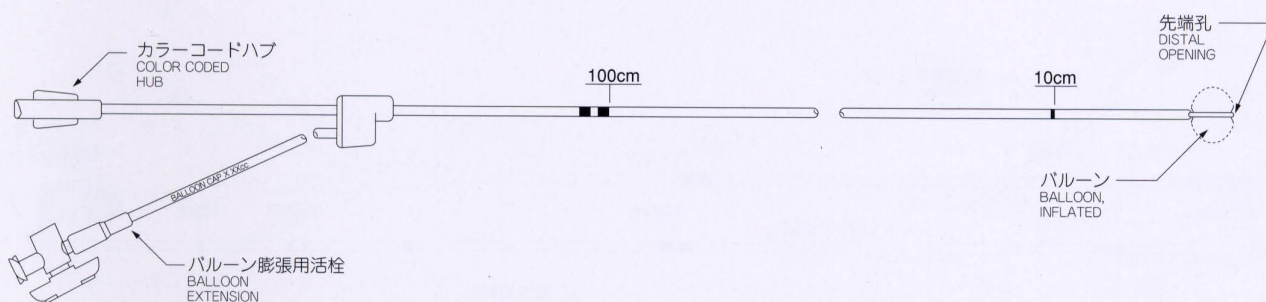

承認番号：08B輸第0495号

モデル番号	サイズ	使用イントロ デューサー サイズ	有効長さ	材質	最大バルーン 膨張容量	ガイドワイヤー サイズ
152-60 (7185/V)	5FR	5FR	60cm	塩化ビニール	0.75cc	.020in.
152-60P (7185)	5FR	5FR	60cm	ポリウレタン	0.75cc	.020in.
162-80 (7256/V)	6FR	6FR	80cm	塩化ビニール	1.25cc	.025in.
162-80P (7256)	6FR	6FR	80cm	ポリウレタン	1.25cc	.025in.
172-110 (7287/V)	7FR	7FR	110cm	塩化ビニール	1.5cc	.038in.
172-110P (7287)	7FR	7FR	110cm	ポリウレタン	1.5cc	.038in.

適用

酸素濃度測定のための血液サンプル採取。中心静脈圧、右室圧、肺動脈圧、肺動脈ウェッジ圧などの右心圧測定。右心を経由する全ての房室・血管内の血液サンプル採取や圧測定も可能。